



DOLOMITE *ALPHA BASIC*

SV BRUKSANVISNING

GB INSTRUCTIONS

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

NO BRUKSANVISNING


DK BRUGSANVISNING


FI KÄYTTÖOHJE

NL GEBRUIKSAANWIJZING

IT ISTRUZIONI PER L'USO

FR MODE D'EMPLOI

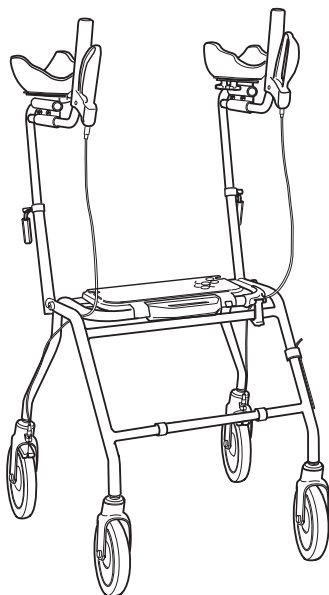

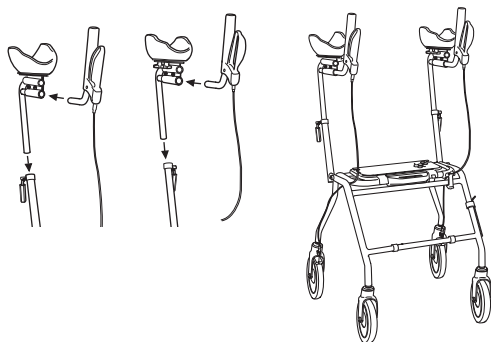

SV BRUKSANVISNING

Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Ordinator/patientansvarig ansvarar för produktens lämplighet till enskild individ.

Rollatorn är anpassad för både inom och utomhusbruk.

GB OPERATING INSTRUCTIONS

Study the operating instructions carefully before use. The person who prescribes the product or who is otherwise responsible for the user must ensure that the product is suitable for the user.

The walker is suitable for use both indoors and outdoors.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung vor der Anwendung sorgfältig durchlesen. Der Verschreiber, der behandelnde Arzt oder die behandelnde Pflegekraft haften für die individuelle Eignung des Produktes für den Patienten.

Der Rollator ist für den Gebrauch drinnen und draußen bestimmt.

NO BRUKSANVISNING

Les nøye igjennom bruksanvisningen før bruk. Foreskriver/pasientansvarlig er ansvarlig for at produktet egner seg til aktuell bruker.

Ilatoren er tilpasset for både innendørs og utendørs bruk.

DK BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt før ibrug-tagning. Ordreafgiver/terapeut er ansvarlig, for at produktet er tilpasset til den enkelte person.

Rollatorerne kan anvendes til både indendørs- og udendørsbrug.

FI KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohje huolellisesti. Tuolin määrännyt/potilaasta vastaava on vastuussa tuotteen sopivuudesta yksittäiselle henkilölle.

Rollaattori on tehty sekä sisä- että ulkokäyttöön.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voor gebruik eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing. Diegene die de stoel voorschrijft/de patiëntverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat het product geschikt is voor de patiënt in kwestie.

De rollator is bedoeld voor gebruik binnen en buiten.

IT ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Il medico/responsabile del paziente risponde dell'idoneità del prodotto per i singoli soggetti.

Il deambulatore è progettato per l'uso sia in interni che all'aperto.

FR MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation. Le prescripteur / responsable du patient répond de la convenance du produit pour chaque cas individuel.

SV ANPASSNINGSMÖJLIGHETER

• Höjdjustering.....	8
• Inåtrotering av armstöd	8
• Djupledsjustering.....	10
• Inåtrotering av armstödsplattor	10
• Vinkelställning av handtag	10
• Justering av armstödsplattor i djupled	10
• Justering av avstånd mellan armstöd	8,12
• Inåtvinkling av armstödsplattor.....	12

GB ADJUSTMENT POSSIBILITIES

• Height adjustment.....	8
• Inwards rotation of arm supports	8
• Depth adjustment.....	10
• Inwards rotation of arm support plates.....	10
• Angular setting of handle.....	10
• Depth adjustment of the arm support plates	10
• Adjustment of distance between arm supports	8,12
• Inwards rotation of arm support plates.....	12

DE EINSTELLSMÖGLICHKEITEN

• Höhenverstellung.....	8
• Verstellung der Armstützen nach innen	8
• Tiefenverstellung	10
• Winkelverstellung der Auflageschalen	10
• Winkelverstellung des Handgriff	10
• Tiefeneinstellung der Auflageschalen	10
• Einstellung des Abstandes zwischen den Armstützen	8,12
• Neigung der Auflageschalen nach innen	12

NO JUSTERINGSMULIGHETER

• Høydejustering	8
• Innoverrotering av armstøtter	8
• Dybdejustering	10
• Innoverrotering av armstøtteplater	10
• Vinkeljustering av håndtak	10
• Dybdejustering av armstøtteplater	10
• Justering av avstand mellom armstøtter	8,12
• Innovervinkling av armstøtteplater	12

DK INDSTILLINGSMULIGHEDER

• Højdeindstilling	9
• Vinkelindstilling af armlæn indad	9
• Justering i dybden	11
• Vinkelindstilling af underarmsstøtter	11
• Vinkelindstilling af håndtag	11
• Justering af underarmsstøtter i dybden	11
• Justering af afstand mellem armlæn	9,12
• Indadvinkling af underarmsstøtter	12

FI SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET

• Korkeussäätö	9
• Sisään kiertyvät käsinojat	9
• Syvyyssäätö	11
• Sisään kiertyvät käsinojen levyt	11
• Kahvojen kulmasäätö	11
• Käsinojen levyjen säätö syvyyssuunnassa	11
• Käsinojen etäisyyden säätö	9,12
• Käsinojen levyjen säätö sisäänpäin	12

NL AANPASSINGSMOGELIJKHEID



- Hoogte-instelling 9
- Naar binnen draaien van de armleuningen 9
- Diepte-instelling 11
- Naar binnen draaien van de armleuningplaten 11
- Hoekinstelling van de handvat 11
- Diepte-instelling van de armleuningplaten 11
- Instelling van de afstand tussen de armleuningen 9, 12
- Naar binnen draaien van de armleuningplaten 12

IT POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE

- Regolazione dell'altezza 9
- Rotazione dei braccioli verso l'interno 9
- Regolazione della profondità 11
- Rotazione delle piastre dei braccioli verso l'interno 11
- Regolazione angolare del freno 11
- Regolazione della profondità delle piastre dei braccioli 11
- Regolazione della distanza tra i braccioli 9, 12
- Angolazione delle piastre dei braccioli verso l'interno 12

FR POSSIBILITÉS D'ADAPTATION

- Réglage de la hauteur 9
- Pivotement des accoudoirs vers l'intérieur 9
- Réglage de la profondeur 11
- Pivotement des plateaux accoudoirs vers l'intérieur 11
- Positionnement oblique de la poignée 11
- Réglage des plateaux accoudoirs en profondeur 11
- Réglage de la distance entre les accoudoirs 9, 12
- Inclinaison des plateaux accoudoirs vers l'intérieur 12

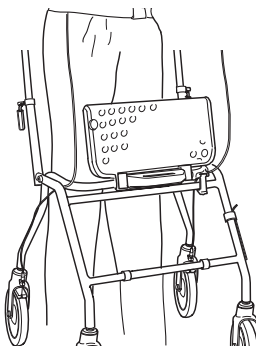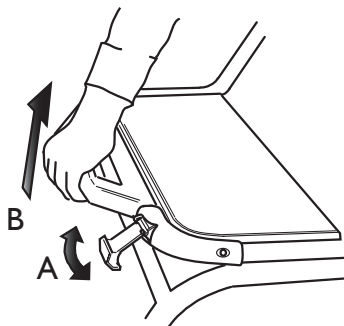

SV IHOPFÄLLNING/SITS

Fäll upp lyftspärren (A) och lyft handtaget (B) för ihopfällning.

Ihopfällt läge. Platssparande.

För körklart läge, håll emot tummen för låsning. Ett klickljud indikerar rätt läge.

Se till att lyftspärren är på plats när rollatorn åter tas i bruk.

Sitsen är uppfällbar för att ge ett större gångutrymme och för att göra det lättare att komma åt.

GB FOLDING/SEAT

Pull the folding blocker (A) and lift the handle (B) for folding.

Folded position. Space-saving.

For ready-to-start position, block with thumb for locking. A clicking sound indicates right position.

Make sure that the folding blocker is in place when the walker is to be used again.

The seat can be folded up to provide a larger walking space, and in order to increase accessibility.

DE ZUSAMMENKLAPPEN/KLAPPSITZ

Zum Zusammenklappen die Sperrvorrichtung (A) lösen und den Handgriff (B) anheben.

Zusammengeklappter Zustand. Platzsparend.

Drücken Sie den Handgriff herunter, um den Rollator wieder aufzustellen.

Drücken Sie mit dem Daumen gegen die rote Sperrvorrichtung, um die Gehhilfe wieder fahrbereit zu machen. Ist ein Klicken zu hören, befindet sich die Arretierung in der richtigen Stellung.

Vergewissern Sie sich, dass die Sperrvorrichtung richtig sitzt, bevor Sie die Gehhilfe anschließend wieder in Gebrauch nehmen.

Der Sitz ist hochklappbar, um den Laufbereich zu erweitern und somit das Gehen zu erleichtern.

NO SAMMENKLAPPING/KLAPPSETE

Trekk ut løftesperren (A) og løft håndtaket (B) for sammenklapping. Sammenklappet stilling.

Plassbesparende. For kjøreklar stilling, trykk ned håndtaket og press tommelen mot den røde sperreinretningen for å låse. En klikkelyd vil høres når sperren befinner seg i riktig stilling. Se til at løftesperren er på plass når rullatoren tas i bruk igjen.

Setet er oppfellbart for å gi større gangplass og for å gjøre det lettere å komme til.

DK SAMMENKLAPNING/KLAPSÆDE

Fæld løftespærren (A) op og træk i håndtaget (B) for at klappe sammen.

Sammenklappet stilling. Pladsbesparende.

Gør rollatoren køreklar ved at trykke håndtaget ned og presse tommelfingeren mod løfte spærren indtil den låses. Et klik indikerer korrekt stilling.

Kontrollér, at løftespærren er på plads, når rollatoren tages i brug igen.

Sædet er opklappeligt for at give mere gangplads og mulighed for lettere at nå ting i skabe etc.

FI TAITAMINEN KOKOON/ISTUIN

Avaa salpa (A) ja taita kokoon nostamalla kahvasta (B).

Säästää tilaa kokoon taitettuna.

Laitettaessa ajokuntoon, pidä peukalolla vastaan lukittaessa. Naksahdusääni ilmoittaa, että asento on oikea.

Varmista, että salpa on paikallaan ennen kuin rollaattori otetaan uudelleen käyttöön.

Istuimen tulee olla ylhäällä, jolloin saadaan parempi kävelytila ja ulottuvuus.

NL OPVOUWEN/ZITJE

Om het looprek (A) op te vouwen: (B) ontgrendel de blokkering en trek het handvat omhoog.

Opgevouwen looprek. Neemt minder plaats in.

Om het looprek gebruiksklaar te maken: blokkeer met uw duim om te vergrendelen. Een klikkend geluid geeft de juiste positie aan.

Zorg ervoor dat de blokkering op zijn plaats zit wanneer u het looprek terug in gebruik neemt.

Het zitje kan omhoog geklapt worden om meer loopruimte en bewegingsvrijheid te bieden.

IT RIPIEGATURA/SEDILE

Sbloccare il dispositivo di bloccaggio sollevamento (A) e sollevare l'impugnatura (B) per effettuare la ripiegatura.

Posizione ripiegata, soluzione salvaspazio.

Per passare alla posizione di guida, effettuare il bloccaggio con il pollice. Un clic indica che è stata raggiunta la posizione corretta.

Controllare che il dispositivo di bloccaggio sia posizionato correttamente quando occorre utilizzare nuovamente il deambulatore.

Il sedile può essere ripiegato per offrire più spazio alle gambe e per facilitare l'accesso.

FR PLIAGE/SIÈGE


Tirez sur la manette (A) de blocage et soulevez la poignée (B) de pliage.

Position pliée. Économie d'espace.

Pour remettre en position d'utilisation et verrouiller, bloquez avec le pouce. Un clic indique le retour en position correcte.

Vérifiez que le la manette de blocage est bien en place avant d'utiliser le déambulateur.

Le siège est pliable pour augmenter l'espace pour les jambes et l'accès général.

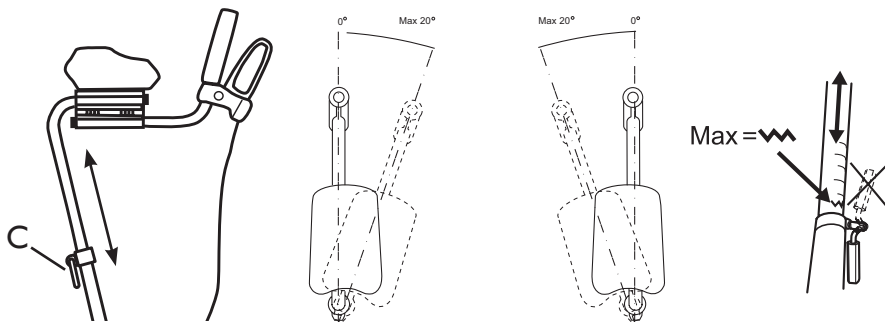

SV HÖJDJUSTERING/INÅTROTERING AV ARMSTÖD

Inställning SKA göras av ordinatör!

Lossa vredet (C), justera till lämplig höjd och vinkel. Drag åt ordentligt.

Vinkelställning: armstöden får vinklas maximalt 20° inåt. Får ej vinklas utåt.

GB HEIGHT ADJUSTMENT/ INWARDS ROTATION OF ARM SUPPORT

Adjustment **MUST** be made by your dealer.

Loosen the lever(C)/adjust to suitable height and angle. Tighten carefully.

Angular setting: the arm supports can be angled maximum 20° towards the center of the walker. Must not be angled outwards.

DE HÖHEN- UND WINKELVERSTELLUNG DER ARMSTÜTZEN

Lassen Sie diese Einstellungen **UNBEDINGT** von einem Fachmann vornehmen!

Den Hebel (C) lösen und die passende Höhen- und Winkleinstellung wählen.

Hebel wieder sorgfältig feststellen.

Winkleinstellung: Die Armstützen dürfen bis max. 20° nach innen geneigt werden.

Armstützen nicht nach außen drehen.

NO HØYDEJUSTERING/INNOVERROTERTING AV ARMSTØTTER

Innstilling **SKAL** foretas av din forhandler!

Løsne spaken (C), juster til passende høyde og vinkel. Trekk til. Skru til ordentlig.

Dra ut justeringsspaken og vri den slik at spaken peker nedover.

Vinkelstilling: armstøttene kan vinkles maksimum 20 grader innover.

Skal ikke vinkles utover.

DK HØJDEJUSTERING/VINKELINDSTILLING AF ARMLÆN INDAD

Indstillingen må KUN foretages af en fagmand!

Løsn grebet (C), justér til passende højde og vinkel. Tilspænd. Spænd skruen godt til.

Vinkelstilling: armsstøtterne kan maksimalt vinkles 20° indad. Må ikke vinkles udad.

FI KÄSINOJEN KORKEUSSÄÄTÖ/KIERTÄMINEN SISÄÄNPÄIN

Toimittajan ON TEHTÄVÄ säädö!

Löysää kahva (C), säädä sopivaan korkeuteen ja kulmaan. Kiristä. Kiristä kunnolla

Vedä säätökahva ulos ja kierrä niin, että kahva osoittaa alaspäin.

Kulma-asento: käsinoja saadaan kääntää enintään 20° sisäänpäin.

Ei saa säätää viistoon ulospäin.

NL HOOGTE-INSTELLING/NAAR BINNEN DRAAIEN VAN DE ARMLEUNING

De instelling MOET uitgevoerd worden door uw verdeler.

Draai de knop (C) los, stel in op de gewenste hoogte en in de gewenste hoek.

Haal aan. Schroef goed vast.

Hoekinstelling: de armleuning mogen tot maximaal 20° naar het midden van de rollator worden vastgezet. Mag niet naar buiten gedraaid worden.

IT REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA/ROTAZIONE DEI BRACCIOLI VERSO L'INTERNO

La regolazione DEVE essere effettuata dal rivenditore.

Allentare la manopola (C) e regolare all'altezza ed all'angolo corretti. Serrare fortemente.


Regolazione dell'angolo: max. regolazione 20°. Non angolare verso l'esterno.

FR RÉGLAGE DE LA HAUTEUR / PIVOTEMENT INTÉRIEUR DES ACCOUDOIRS

Le réglage DOIT être effectué par le prescripteur .

Desserrez la molette (C), réglez la hauteur et l'angle. Resserrez avec soin.

Angle maximum : 20°. Ne pas faire pivoter vers l'extérieur.

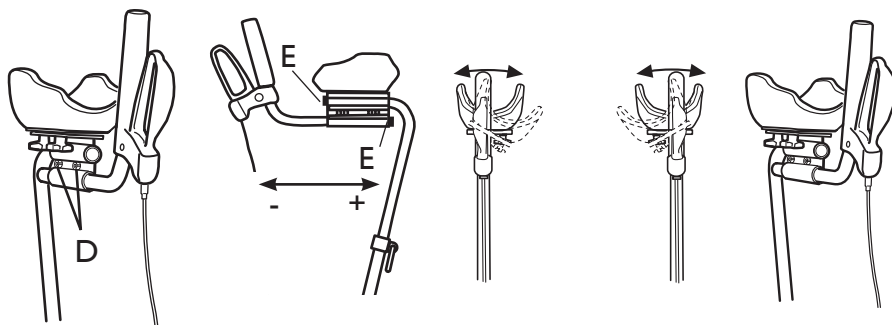

SV DJUPLEDSJUSTERING

Lossa de båda skruvarna (D), med medföljande nyckel. Nu är följande justeringar möjliga:

- Djupledsjustering: svarta ändpluggar (E) ska alltid vara synliga.
- Inåtrotering av armstöds kopp.
- Vinkelställning av handtag.

Gör önskade justeringar. Skruva åt ordentligt.

GB DEPTH ADJUSTMENT

Loosen the two screws (D) with the attached key. The following adjustments are now possible:

- Depth adjustment: the black end plugs (E) should always be visible.
- Inwards rotation of arm support cup.
- Angular setting of brake.

Make the adjustments wanted. Tighten carefully.

DE TIEFENVERSTELLUNG

Beide Schrauben (D) mit dem mitgelieferten Schlüssel lösen. Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

- Tiefenverstellung: Die schwarzen Verschlusskappen (E) müssen sichtbar sein!
- Winkelverstellung der Auflageschalen.
- Winkelverstellung der Bremsen.

Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

Anschließend die Schrauben wieder anziehen. Sorgfältig.

NO DYBDEJUSTERING

Løsne begge skruene (D) med medfølgende nøkkel. Nå er det mulig med følgende justeringer:

- Dybdejustering: de svarte endepluggene (E) skal alltid være synlige.
- Innoverrotering av armstøttekopp.
- Vinkelinnstilling av håndtak.

Foretatt ønskede justeringer. Trekk til skruene igjen. Skru til ordentlig.

DK JUSTERING I DYBDEN

Løsn de to skruer (D) med den medfølgende nøgle. Nu er følgende justeringer mulige:

- Justering i dybden: de sorte blindpropper (E) skal altid kunne ses.
- Vinkelindstilling af underarmsstøtter
- Vinkelindstilling af håndtag

Foretag de ønskede justeringer. Skru fast. Spænd skruen godt til.

FI SYVYSSÄÄTÖ

Irrota molemmat ruuvit (D) mukana seuraavalla avaimella. Nyt seuraavat säädöt ovat mahdollisia:

- Syvyysäättö: mustien päätytulppien (E) tulee aina olla näkyvissä.
- Käsinojien kiertäminen sisäänpäin
- Kahvojen kulman asetus

Tee halutut säädöt. Kiristä ruuvit. Kiristä kunnolla

NL DIEPTE-INSTELLING

E. Maak de beide schroeven (D) los met behulp van de meegeleverde sleutel. Nu kunnen de volgende instellingen uitgevoerd worden:

- Diepte-instelling, zwarte eindpluggen (E) moeten altijd zichtbaar zijn.
- Naar binnen draaien van de armleuningkop
- Handvathoekinstelling.

Voer de gewenste instellingen uit. Haal de schroeven terug aan. Schroef goed vast.

IT REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA'

E. Allentare le due viti (D) con la chiave in dotazione. A questo punto è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- Regolazione della profondità, i perni terminali neri devono (E) essere sempre visibili.
- Rotazione delle coppe dei braccioli verso l'interno
- Regolazione dell'angolo del freno


Una volta ottenute le regolazioni desiderate, serrare le viti.

FR RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR

Desserrez les deux vis (D) à l'aide de la clé jointe. Vous pouvez alors régler:

- La profondeur: les tampons noirs (E) aux extrémités doivent toujours être visibles.
- Le pivotement intérieur des coupelles d'accoudoir ;
- L'angle de la poignée.

Procédez aux réglages voulus. Révissez avec soin.

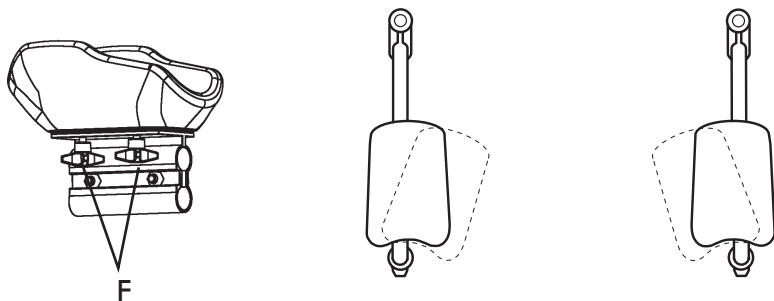

SV INÅTVINKLING AV ARMSTÖDSPLATTOR

Lossa de båda rattarna (F).

Justera armstödskopparna till lämplig bredd/vinkel.

GB INWARDS ROTATION OF ARM SUPPORT PLATES

Loosen the two knobs (F).

Adjust the two arm support cups to appropriate width/angle.

DE NEIGUNG DER AUFLAGESCHALEN NACH INNEN

Beide Sternschrauben (F) lösen.

Passende Breite-/Winkeleinstellung der Auflageschalen.

NO INNOVERVINKLING AV ARMSTØTTEPLATER

Løsne de to knottene (F).

Justér armstøttene til riktig dybde og vinkel

DK INDADVINKLING AF UNDERARMSSTØTTER

Løsn de to greb (F).

Justér underarmsstøtterne til passende bredde/vinkel

FI KÄSINOJIENT LEVYJEN SÄÄTÖ SISÄÄNPÄIN

Löysää molempia nuppeja (F).

Säädä käsinojien kupit sopivaan leveyteen/kulmaan

NL NAAR BINNEN DRAAIEN VAN DE ARMLEUNINGPLATEN

Maak beide knoppen (F) los.

Stel de armsteunkoppen in op de gewenste breedte/in de gewenste hoek.

IT ANGOLAZIONE DELLE PIASTRE DEI BRACCIOLI VERSO L'INTERNO


Regolare le coppe (F) dei.

Regolare le coppe dei braccioli alla larghezza all'angolo corretti.

FR INCLINAISON DES PLATEAUX ACCOUDOIRS VERS L'INTÉRIEUR

Desserrez les deux molettes (F).

Réglez l'angle/largeur des coupelles d'accoudoirs.

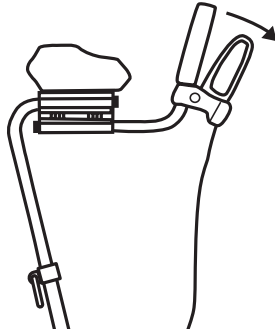**SV PARKERINGSBROMS**

Tryck mjukt ifrån dig för parkeringsläge. Ett tydligt klick indikerar att bromsen är i rätt läge. Det är viktigt att båda bromsar sätts i parkeringsläge. För att frigöra bromsen tryck uppåt.

GB PARKING BRAKE

Press gently away from yourself for parking position. A clear sound is heard when the brake is placed in correct position. N.b. Always place both brakes in parking position. Pull upwards to loosen the brake.

DE FESTSTELLBREMSE

Drücken Sie den Bremshebel leicht nach vorne, um die Bremse festzustellen. Die Bremse wird entriegelt, wenn der Hebel wieder nach hinten gezogen wird. Achtung: Stellen Sie stets beide Bremsen fest, wenn das Gerät steht.

NO PARKERINGSBREMS

Trykk mykt fra deg for parkeringsstilling. Et tydelig klikk indikerer at bremsen er i rett stilling. Der er viktig at begge bremses settes i parkeringsstilling. For å frigjøre bremsen, trykk bakover.

DK PARKERINGSBREMSE

Tryk blidt væk fra dig for parkeringsstilling. Det er vigtigt at begge bremses låses ved parkering; bremsene udløses igen ved et let træk bagud.

FI PYSÄKÖINTIJARRU

Työnnä pehmeästi pysäköintiasentoon. Selvä naksahdus ilmoittaa jarrun olevan oikeassa asennossa. On tärkeää lukita molemmat jarrut pysäköintiasentoon. Jarrun vapautus tapahtuu painamalla taaksepäin

NL PARKEERREM

Voorzichtig van u af drukken voor de parkeerstand. Een klikgeluid is hoorbaar, wanneer de rem in de juiste positie is geplaatst. N.B. Plaats altijd beide remmen in de parkeerstand. Trek achteruit om de rem te ontgrendelen.


IT FRENO DI STAZIONAMENTO

Premere con cautela in avanti per inserire la posizione di stazionamento. Uno scatto segnala che il freno è in posizione corretta. E, importante che entrambi i freni siano in posizione di stazionamento. Premere all'indietro per rilasciare il freno.

FR FREIN DE STATIONNEMENT

Pour stationner, appuyez doucement vers l'extérieur sur le frein de stationnement. Un clic parfaitement audible indique que le frein est correctement mis. Il est important que les freins soient tous les deux mis lors du stationnement. Pour libérer les freins, appuyez vers le haut.

DOLOMITE ALPHA BASIC

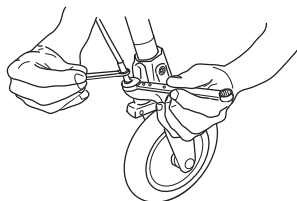

8, 10



SV BROMSAR

Vid dålig bromsverkan justera bromsvajern med fast nyckel nr 8 och 10 (medföljer ej).

GB BRAKES

Adjust the brake wire using cap keys Nos. 8 and 10 in case of poor brake effect (not included).

DE BREMSEN

Bei nicht einwandfreiem Bremsverhalten sind die Bremszüge mit den Steckschlüsseln Nr. 8 und 10 neu einzustellen (Werkzeug ist nicht im Lieferumfang mit enthalten).

NO BREMSER

Når bremsen virker dårlig, skal bremseveieren justeres med pipenøkkel nr. 8 og 10 (medfølger ikke).

DK BREMSER

Ved dårlig bremseeffekt justeres bremsekablet med fast nøgle nr. 8 og 10 (medfølger ikke).

FI JARRUT

Jarrujen heikentyessä jarruvaijeria tulee säätää kiintoavaimilla 8 ja 10 (eitule mukuna).

NL REMMEN


Als de rem slecht werkt, moet de remkabel bijgesteld worden met behulp van dichte sleutels nr. 8 en 10 (niet inbegrepen).

IT FRENI

Se l'effetto frenante è insufficiente, regolare il cavo dei freni con le chiavi fisse n. 8 e 10 (non in dotazione).


FR FREINS

En cas de freinage insuffisant, réglez la câble de frein avec une clé plate no 8 et 10 (non fournie).

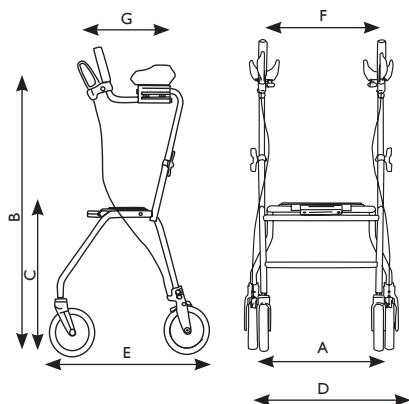

ALPHA BASIC

A	510
B	940-1190
C	620
D	650
E	700
F	440
G	290-330

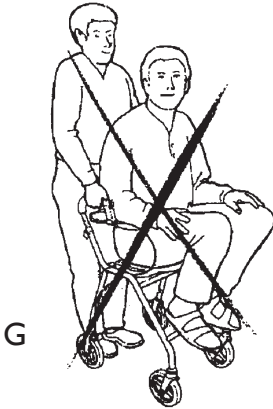


G

H



I

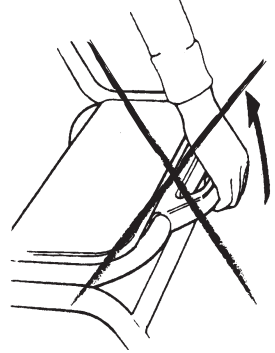**SV**

- G. Det är förbjudet att stå på rollatorn samt att använda den för persontransport.
 H. Iakta försiktighet vid lutande mark.
 I. Lyft aldrig rollatorn i fällhandtaget när rollatorn används.

GB

- G. It is prohibited to stand on the walker and to use it for transport of people.
 H. Be extra careful when using the walker on a sloping surface.
 I. Never lift the rollator in the folding handle when it is in use.

DE

- G. Es ist nicht zulässig, auf der Gehhilfe zu stehen, oder Personen mit ihr zu befördern.
 H. Seien Sie besonders vorsichtig bei abschüssigem Untergrund.
 I. Den Rollator während des Gebrauchs nie am Handgriff für den Faltmechanismus anheben.

NO

- G. Det er forbudt å stå på rullatoren, samt å bruke den til transport av personer.
 H. Vær forsiktig ved hellende mark.
 I. Løft aldri rollatoren i feltningshåndtaket når den er i bruk.

DK

- G. Det er forbudt at stå på rollatoren samt at anvende den til persontransport.
 H. Vær forsigtig på skrånende veje.
 I. Løft aldrig rollatoren i grebet til sammenfoldning, når rollatoren er i brug.

FI

- G. Seisominen rollaattorin päällä tai sen käyttö henkilökuljetuksiin on kielletty.
 H. Noudata varovaisuutta kaltevalla alustalla.
 I. Älä nosta kävelytelinettä kokoonpanokahvasta käytön aikana

NL

- G. Het is verboden om op het looprek te staan of om het te gebruiken voor personenvervoer.
 H. Wees voorzichtig op een hellende ondergrond.
 I. Til de rollator nooit op aan het vouw handvat.

IT


- G. E' vietato salire sul deambulatore ed utilizzarlo per il trasporto di persone.
 H. Prestare la massima attenzione su superfici inclinate.
 I. NON sollevare mai il rollator, durante l'uso, afferrandolo per la maniglia di chiusura

FR

- G. Il est interdit de monter sur le déambulateur et de l'utiliser pour le transport de personnes.
 H. Soyez prudent sur les terrains en pente.
 I. Ne jamais soulever le rollator avec la pognée de pliage durant son utilisation.

DOLOMITE ALPHA BASIC

<2001-08

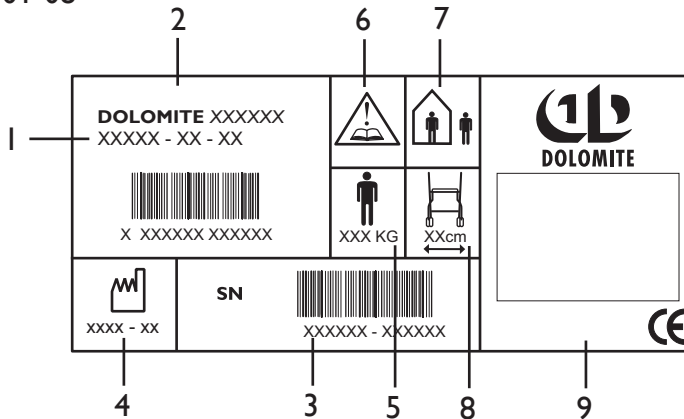

SV

På etiketten på **DOLOMITE ALPHA BASIC** finns all viktig teknisk information:

- 1: Artikelnummer
- 2: Produktnamn
- 3: Serienummer
- 4: Tillverkningsdatum
- 5: Max brukarvikt
- 6: OBS! Se bruksanvisning.
- 7: In- och utomhus rollator.
- 8: Max bredd på rollator.
- 9: Tillverkarens namn.

GB

All technical data available on the **DOLOMITE ALPHA BASIC** label:

- 1: Article number
- 2: Product name
- 3: Serial number
- 4: Date of manufacture
- 5: Max. user weight
- 6: NB! See user manual.
- 7: In- and outdoor rollator.
- 8: Max. width of rollator.
- 9: Manufacturer's name.

DE

Dem Typenschild des **DOLOMITE ALPHA BASIC** können Sie alle technische Daten entnehmen:

- 1: Artikelnummer
- 2: Produktname
- 3: Seriennummer
- 4: Herstellungsdatum
- 5: Max. Anwendergewicht
- 6: Bedienungsanleitung beachten!
- 7: Rollator für den Innen- und Außengebrauch.
- 8: Max. Breite des Rollators.
- 9: Name des Herstellers.

SV**ANVISNING FÖR DESTRUKTION AV PRODUKT OCH FÖRPACKNING:**

När produkten är förbrukad ska denna med tillbehör samt förpackningsmaterialet sorteras på rätt sätt. De enskilda delarna kan separeras och hanteras enligt materialbeteckningen.

GB**INSTRUCTIONS FOR DESTRUCTION OF PRODUCT AND PACKING:**

When the product can no longer be used, it and its accessories as well as the packaging material should be assorted in the correct way. The individual parts can be separated and handled according to the list specification.

DE**ANGABEN ZUR ENTSORGUNG VON GERÄT UND VERPACKUNG:**

Nach der Produktlebenszeit soll das Produkt mit Zubehör und Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgt werden. Die einzelnen Teile können entsprechend der Materialbezeichnung getrennt und entsorgt werden.

NO**ANVISNING FOR DESTRUKSJON AV PRODUKT OG EMBALLASJE:**

Så snart produktet er forbrukt skal dette med tilbehør samt emballasjematerialet sorteres på riktig måte. De enkelte delene kan skilles fra hverandre og håndteres i overensstemmelse med materialbetegnelsen.

DK**ANVISNING FOR DESTRUERING AF PRODUKT OG FORPAKNING:**

Når produktet er opbrugt skal dette samt tilbehør og forpakningsmateriale sorteres på en korrekt måde. De enkelte dele kan skilles og behandles ifølge materialebetegnelsen.

FI**OHJEET TUOTTEEN JA PAKKAUKSEN HÄVITTÄMISESTÄ:**

Kun tuote on käytetty, niin se tulee yhdessä varusteiden ja pakkausmateriaalin kanssa lajitella oikealla tavalla. Yksittäiset osat voidaan irrottaa toisistaan ja käsitellä materiaalinimikkeen mukaisesti.

NL**INSTRUCTIES VOOR DE VERNIETIGING VAN PRODUCT EN VERPAKKING:**

Wanneer het product afgedankt wordt, moet het samen met de accessoires en de verpakking op de juiste manier gesorteerd worden. De verschillende onderdelen kunnen volgens de materiaalaanduiding verwerkt worden.

IT**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLO:**

Al termine della vita utile, il prodotto, gli accessori e l'imballo devono essere smaltiti correttamente. Le singole parti possono essere soggette a raccolta differenziata e trattate come indicato nella scheda dei materiali.

FR**INSTRUCTIONS POUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE :**

Une fois hors d'usage, le produit ainsi que ses accessoires et son emballage doivent faire l'objet d'un tri de recyclage. Les différentes pièces doivent être triées et traitées selon les matériaux dont elles sont constituées.

SV UNDERHÅLL – SÄKERHET

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör Du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

- Gör rent rollatorn med vanliga rengöringsmedel. Torka den torr. Håll hjulen rena.
- Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
- Om Din rollator inte är i fullgod funktion - tag genast kontakt med Din ordinator. Defekt rollator får inte användas. Gör inga ingrepp själv!

Användarens maxvikt 125 kg. För ingrepp i rollatorn

(anpassningar, bristfälliga reparationer), utan DOLOMITes kontroll, ansvaras ej.

GB MAINTENANCE - SAFETY

To ensure good performance and safety you should regularly check that the following is carried out:

- Clean the rollator with solvent-free household cleaner. Keep the wheels clean.
- Ensure that screws and adjustments are properly tightened.
- Immediately contact the nearest dealer if a fault should appear. Never use a defective walker. Do not attempt repairs yourself!

N.B. Your walker should only be used as a walking aid! User's max. weight: 275 lbs. (125 kg, 20 stones.) DOLOMITes will not accept responsibility for adaptations, faulty repairs, etc, that are outside their control.

DE WARTUNG UND SICHERHEIT

Im Rahmen der Wartung und aus Sicherheitsaspekten sollten die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen regelmäßig durchgeführt werden:

- Die Säuberung der Gehhilfe mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und anschließendes Trockenwischen. Sauberhalten der Räder.
- Sicherstellen, dass Schrauben und Verstellelemente fest angezogen sind.
- Sollte Ihre Gehhilfe nicht einwandfrei funktionieren, müssen Sie sofort einen Fachmann hinzuziehen. Eine defekte Gehhilfe darf nicht benutzt werden. Nehmen Sie niemals selbst Veränderungen oder Reparaturen vor!

Das Gewicht des Nutzers darf 125 kg nicht überschreiten.

Für Manipulationen an der Gehhilfe (Einstellungen, nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen), die sich der Kontrolle DOLOMITes entziehen, wird nicht gehaftet.

NO VEDLIKEHOLD – SIKKERHET

For å opprettholde funksjon og sikkerhet bør du regelmessig sørge for at følgende utføres:

- Rengjør rullatoren med vanlige rengjøringsmidler. Tørk den helt tørr. Hold hjulene rene.
- Se til at skruer og justeringsinnretninger er trukket godt til.
- Hvis rullatoren ikke virker helt som den skal, ta straks kontakt med din forhandler. Defekt rullator må ikke brukes. Foreta aldri endringer og reparasjoner på egen hånd!

Maks. brukervekt 125 kg. DOLOMITes frasier seg ethvert ansvar for inngrep på rullatoren (endringer, reparasjoner som ikke utføres riktig etc.) som foretas utenfor DOLOMITes kontroll.

DK VEDLIGEHD – SIKKERHED

For at opretholde funktion og sikkerhed bør man regelmæssigt sørge for at udføre nedenstående foranstaltninger:

- Gør rollatoren ren med et almindeligt rengøringsmiddel. Tør den af bagefter. Hold hjulene rene.
- Kontrollér, at skruer og reguleringer er ordentligt tilspændt.
- Hvis rollatoren ikke fungerer, som den skal - tag straks kontakt med den, som har ordineret hjælpemidlet. En defekt rollator må ikke anvendes. Foretag ingen indgreb selv!

Max. brugervægt 125 kg. Der tages intet ansvar for indgreb

(tilpasninger, mangelfulde reparationer), der er foretaget uden for DOLOMITes kontrol.

FI HUOLTO – TURVALLISUUS

Turvallisuuden ja toimivuuden säilyttäminen edellyttää, että seuraavat toimenpiteet tehdään säännöllisesti:

- Puhdista rollaattori tavallisilla puhdistusaineilla. Kuivaa se kuivaksi. Pidä pyörät puhtaina.
- Tarkista ruuvien ja säätimien asianmukainen kiinnitys.
- Mikäli rollaattoriin tulee vika, ota välittömästi yhteys tuolin toimittajaan. Viallista rollaattoria ei saa käyttää. Älä yritä korjata itse!

Käyttäjän enimmäispaino on 125 kg. DOLOMITES ei vastaa rollaattoriin ilman sen valvontaa tehdyistä korjauksista.

NL ONDERHOUD - VEILIGHEID

Om de goede werking en veiligheid te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de volgende maatregelen regelmatig uitgevoerd worden:

- Maak het looprek schoon met gewoon reinigingsmiddel. Droog het goed af. Hou de wielen schoon.
- Controleer of de schroeven en hendels goed aangehaald zijn.
- Als uw looprek niet goed werkt - neem zo snel mogelijk contact op met uw verdeler.
Een defect looprek mag nooit gebruikt worden. Repareer het nooit zelf!

Maximum gewicht van de gebruiker: 125 kg. DOLOMITES is niet verantwoordelijk voor aanpassingen, gebrekkige reparaties enz. waarover het geen controle heeft.

IT MANUTENZIONE – SICUREZZA

Per garantire un buon funzionamento e condizioni di massima sicurezza, procedere in questo modo ad intervalli regolari:

- Pulire il deambulatore con un normale detergente ed asciugarlo. Tenere pulite le ruote.
- Controllare che viti e comandi siano serrati correttamente.
- Se il deambulatore non funziona correttamente, contattare immediatamente il rivenditore.
Non utilizzare deambulatori difettosi. Non tentare di effettuare le riparazioni da soli.

Peso max dell'utente 125 kg. DOLOMITES non assume alcuna responsabilità per eventuali interventi (adattamenti, riparazioni non effettuate correttamente) eseguiti al di fuori del proprio controllo.

FR ENTRETIEN - SÉCURITÉ

Pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'utilisateur, vous devez régulièrement procéder aux mesures suivantes:

- Nettoyez le déambulateur avec un produit nettoyant habituel et essuyez-le. Nettoyez les roues.
- Vérifiez que toutes les vis et pièces de réglages sont bien serrées.
- En cas de défaut quel qu'il soit, contactez immédiatement votre prescripteur.
Un déambulateur défectueux ne doit jamais être utilisé. Ne faites jamais les réparations vous-même!

Poids max. de l'utilisateur 125 kg. DOLOMITE décline toute responsabilité en cas d'interventions (adaptations ou réparations) sur le déambulateur effectuées sans son contrôle.



MANUFACTURER:
INVACARE DOLOMITE AB
VÄXJÖVÄGEN 303
SE-343 75 DIÖ, SWEDEN

TEL +46 (0)476 53500
FAX +46 (0)476 53598

www.dolomite.biz



SALES COMPANIES:

SWEDEN

Invacare AB
Fagerstagatan 9
I 63 53 Spånga,
Tel: 08-761 7090
Fax: 08-761 8108
www.invacare.se

UNITED KINGDOM

Invacare Ltd,
Pencoed Technology Park, Pencoed
UK-Bridgend CF35 5HZ
TEL (44) (0)1656 776 200
FAX (44) (0)1656 776 201
UK@invacare.com
eire@invacare.com
www.dolomite.biz

GERMANY

AQUATEC GMBH
POSTFACH 1119
ALEMANNENSTRASSE 10
D-88305 ISNY
TEL.: 0049-7562 7000
FAX: +49 (0)7562/70069

NORWAY

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230
Etterstad, N-0603 Oslo
TEL (47) (0)22 57 95 00
FAX(47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
island@invacare.com

DENMARK

Invacare A/S, Sdr. Ringvej
39
DK-2605 Brøndby
TEL (45) (0)36 90 00 00
FAX (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com

NETHERLANDS

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Tel.: +32 (0)50-831010
Fax: +32 (0)50-831011
[email: belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)
www.invacare.be

ITALY

Invacare Mecc San s.r.l.
Via dei Pini 62
I-36016 Thiene (VI)
TEL (39) 0445 38 00 59
FAX (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com

FRANCE

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tél (33) (0)2 47 62 64 66
FAX (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com

DISTRIBUTOR IN FINLAND

Algol-Trehab Oy Karapellontie 6
P.O. Box 13
FIN-02611 Espoo
Telephone: +358 9 50991
Fax: +358 9 5099 490

Importer:

Dealer: